

MASQUE LED TIMELESS - PROTOCOLE SUR 7 JOURS

À ADAPTER SELON RÉSULTATS



PEAU GRASSE OU BOUTONNEUSE (type acnéique)

PHASE AIGÛE



Masque Led **programme bleu** 2 x 10 mn



Masque Led **programme rouge** 10 mn puis **bleu** 10 mn



Appliquer la **crème hyaluserum** matin et soir


HORS PHASE AIGÛE



Appliquer le **masque lyocell** 15 mn puis Masque Led **programme bleu** 10 mn puis **rouge** 10 mn



Masque Led **programme bleu** 10 mn puis **rouge** 10 mn

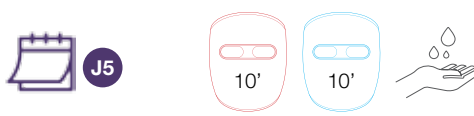

Masque Led **programme rouge** 10 mn puis **bleu** 10 mn puis appliquer la **crème hyaluserum**



Appliquer la **crème hyaluserum**



PEAU ABÎMÉE ET TERNE



Appliquer le **masque lyocell** puis Masque Led **programme rouge** 10 mn puis appliquer la **crème hyaluserum**



Appliquer la **crème hyaluserum** puis Masque Led **programme rouge** 10 mn puis **bleu** 10 mn



Appliquer le **masque biocellulose** puis Masque Led **programme rouge** 2 x 10 mn puis appliquer la **crème hyaluserum**




Appliquer la **crème hyaluserum** puis Masque Led **programme rouge** 10 mn puis **bleu** 10 mn



Appliquer la **crème hyaluserum** matin et soir



ANTI-ÂGE

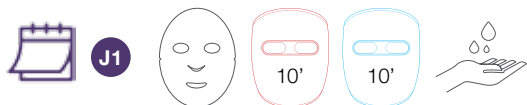

Appliquer le **masque biocellulose** puis Masque Led **programme rouge** 10 mn puis **bleu** 10 mn puis appliquer la **crème hyaluserum**



Appliquer la **crème hyaluserum** avec le Masque Led **programme rouge** 2 x 10 mn



Appliquer la **crème hyaluserum** matin et soir et pose du **masque lyocell** jour



MASQUE LYOCELL® et BIO-CELLULOSE - Mode d'emploi

Démaquillez-vous et nettoyez votre visage. Sortez le masque du sachet et retirez les films de protection. Posez délicatement le masque sur le visage et laissez-le en place pendant 15 minutes. Massez de façon à faire pénétrer le reste de l'essence dans la peau. Rincez la peau. A utiliser une fois par semaine, en complément de vos produits cosmétiques quotidiens afin de conserver l'hydratation. **Conservation** : évitez la lumière du soleil et conservez-le au sec et à température ambiante.



MASQUE LED TIMELESS

Avant l'utilisation, veillez à appliquer une quantité appropriée de produit de soin pour la peau sur le visage après son nettoyage.



1 Lavez-vous le visage (si vous vous maquillez, nettoyez votre visage avec une mousse nettoyante).

2 Appliquer une quantité appropriée de produit de soin pour la peau sur votre visage selon les protocoles.



Indications

- La lumière LED est adaptée pour les soins du visage : hydratation, éclat du teint, resserrement des pores, relâchement cutané.
- La lumière froide a des effets remarquables sur les processus de réparation tissulaires : cicatrices au stade précoce, vergetures, brûlures, coup de soleil...
- La LED est un complément idéal de votre routine beauté.
- Idéal également pour l'hydratation de la peau en profondeur. En effet, après l'application de masques hydratants et revitalisants, la lumière LED améliore la pénétration des principes actifs.

Contre-indications

Grossesse - Epilepsie - Traitement contre l'acné (cyclines ou acide 13-cis rétinoïque, type roacutane)